

Instructie voor de afname van genitaal materiaal bij mannen

Benodigdheden:

- e-swab (met een roze dop).
- voor *Haemophilus ducreyi*: 2 droge wattenstokken



E-swab (verkrijgbaar op het MMI)

Analysemonster:


- urethra-uitstrijk

Aanvraag:

De aanvraag voor het afnemen van materiaal voor microbiologisch onderzoek wordt geregeld door de huisarts, medisch specialist of SOA-arts. Voor de aanvraag van dit onderzoek kan het probleemgericht aanvraagformulier voor huisartsen en het aanvraagformulier microbiologie worden gebruikt. Alle gegevens moeten correct worden ingevuld (patiëntsticker). Vergeet de afname datum niet te vermelden. Bij voorkeur ook de klinische informatie. Het monster moet voorzien worden met de naam en geboortedatum van de patiënt (bij voorkeur m.b.v. een patiëntsticker).

Afname:

1. Voor zowel een *kweek* als een *DNA onderzoek* wordt de e-swab (met een roze dop) gebruikt:
2. Open de verpakking.
3. Gebruik voor de afname een aparte dunne stok (zijn los verkrijgbaar bij het MMI).
4. Breng de wattenstok 2-4 cm de urethra in.
5. Draai de wattenstok enkele seconden rond in het urethrakanaal.
6. Open het busje en steek de wisser erin.
7. Breek de wisser af.
8. Draai de stop op het busje tot deze goed gesloten is.
9. Noteer identificatiegegevens op het busje (of plak een sticker).

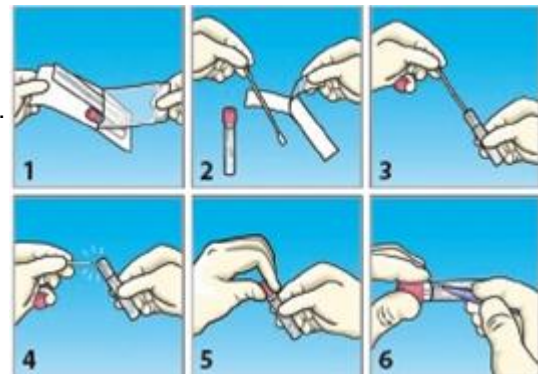

opmerking: Voor DNA-onderzoek kan ook een portie ochtendurine worden gebruikt.

Bij verdenking van een **weke sjanker (*Haemophilus ducreyi*)** moet een uitstrijk van het ulcus op een droge wattenstok (2 stuks) worden ingestuurd:

1. Strijk met een wattenstok over ulcus (bodem en randen).
2. Breng de wattenstok droog in de opberghuls.
3. Ent vervolgens nog een wattenstok.

opmerking: Het betreft een PCR-onderzoek dat uitgevoerd wordt door de GGD Amsterdam.

De uitstrijk wordt samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar het MMI gebracht. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje "Bewaar- en transportinstructies" onder het onderdeel "Informatie voor aanvragers" op onze website www.mmilab.nl.