

## Instructie voor de afname van pus en punctaten

Het materiaal kan met een wattenstok worden afgenomen, maar om te voorkomen dat er een besmetting met de normale huidflora plaatsvindt, kan men -indien mogelijk- het beste de pus opzuigen met een steriele spuit. Ook voor diepere abscessen geniet afname van het materiaal in een steriele spuit de voorkeur. Bij deze wijze van afnemen is het materiaal zeer geschikt voor het onderzoek naar anaëroben.

### Benodigdheden

- wattenpropje
- huiddesinfectans
- steriele spuit (met schroefdopje)
- transportmedium (E-swab)



E-swab (verkrijgbaar bij MMI)

### Analysemonster

- pus
- punctaat

### Aanvraag

De aanvraag voor het afnemen van materiaal wordt geregeld door de huisarts en medisch specialist. Voor de aanvraag van dit onderzoek kan het probleemgericht aanvraagformulier voor huisartsen en het aanvraagformulier microbiologie worden gebruikt. Alle gegevens moeten correct worden ingevuld (patiëntensticker). Vergeet de afname datum niet te vermelden. Bij voorkeur ook de klinische informatie invullen. Het monster moet voorzien worden met de naam en geboortedatum van de patiënt (bij voorkeur m.b.v. een patiëntensticker).

### Afname

1. De huid rond de punctieplaats ontsmetten.
2. Met een spuit ongeveer 2 ml pus/punctaat opzuigen.
3. De naald verwijderen in de daarvoor bestemde naaldencontainer.
4. Het dopje op de spuit schroeven.




het opzuigen van materiaal

Alleen bij zeer kleine hoeveelheden de pus met behulp van een E-swab afnemen.

Gebruiksaanwijzing van de E-swab:

1. Open de verpakking.  
**De wisser bovenaan vastpakken bij de afname van het monster en niet onder het rode streepje.**
2. Met de wisser materiaal afnemen.
3. Open het busje en steek de wisser erin.
4. Breek de wisser af bij het breekpunt (= rode streep).
5. Draai de dop op het busje tot deze goed gesloten is.
6. Noteer identificatiegegevens op het busje (of plak een sticker).

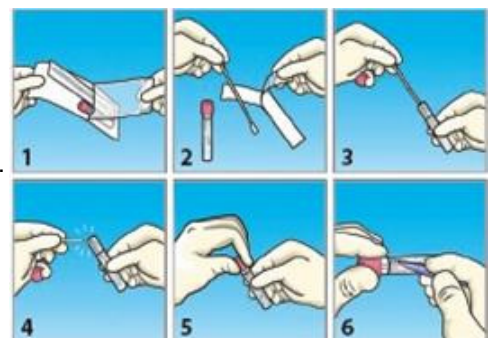

Het materiaal wordt samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar het MMI gebracht. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje "Bewaar- en transportinstructies" onder het onderdeel "Informatie voor aanvragers" op onze website [www.mmilab.nl](http://www.mmilab.nl).